

# Velino

by Haelvoet




HAEЛVOET NV **BELGIË**  
L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER  
T +32 (0) 51 48 66 95 F +32 (0) 51 48 73 19  
INFO@HAEЛVOET.BE WWW.HAEЛVOET.BE

HAEЛVOET S.A.R.L. **FRANKRIJK**  
130, BOULEVARD DE LA LIBERTÉ, 59000 LILLE  
T +33 (0) 3 20 02 71 71 F +33 (0) 3 20 88 18 91  
INFO@HAEЛVOET.FR WWW.HAEЛVOET.FR

HAEЛVOET S.R.L. **ROEMENIË**  
PARCUL INDUSTRIAL 1, 455200 JIBOU, SALAJ  
T +40 (0) 260 64 22 33 F +40 (0) 260 64 22 55  
INFO@HAEЛVOET.RO WWW.HAEЛVOET.RO


HAEЛVOET BV **NEDERLAND**  
SCHIMMINCK 1, 5301 KR ZALTBOMMEL  
T +31 (0) 88 599 05 99 F +31 (0) 88 599 05 00  
INFO@HAEЛVOET.NL WWW.HAEЛVOET.NL

HAEЛVOET SA **ZWITSERLAND**  
ROUTE DE LA PLAINE 45, 1580 AVENCHES  
T +41 (0) 26 675 46 86 F +41 (0) 21 560 46 46  
INFO@HAEЛVOET.CH WWW.HAEЛVOET.CH

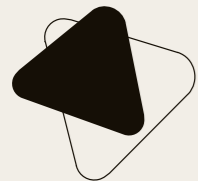

# Velino

een harmonieus geheel

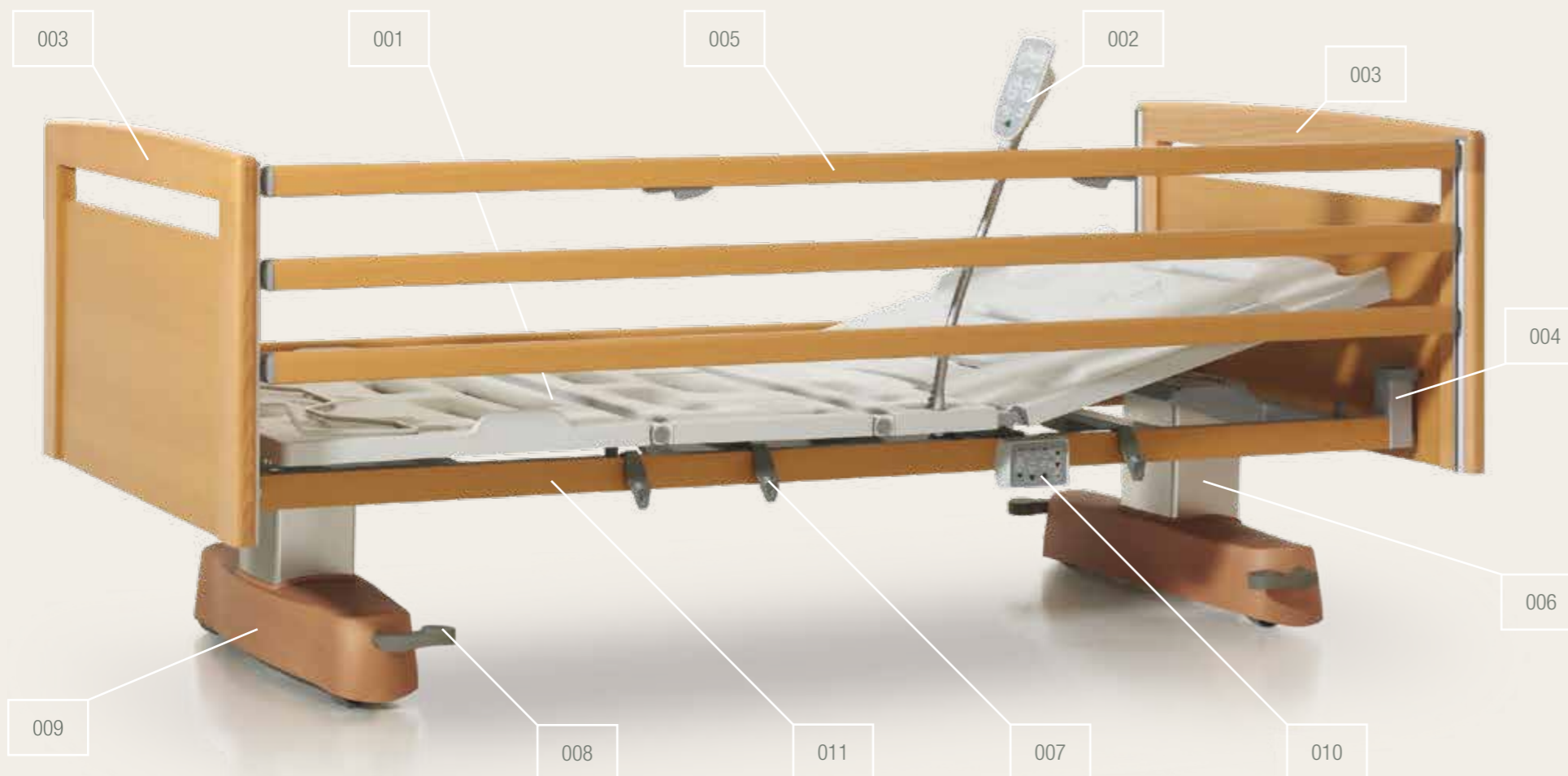

001	<b>Ligvlak • Comfortabel liggen</b>
	Standaard uitgerust met goed ventilerende metalen ligvlakprofielen. De optionele kunststof ligvlakdelen (*) zijn uitneembaar en gemakkelijk in onderhoud.
002	<b>Handschakelaar • Autonome bediening</b>
	Functioneel en gemakkelijk in de hand te nemen. De handschakelaar biedt alle functies om de bewoner zelfstandig in zijn gewenste zit-, lig- of leespositie te brengen.
003	<b>Bedpanelen • Smaakvol design</b>
	Voor het hoofd- en voetpaneel zijn 4 verschillende designvarianten in fraaie houtdecors mogelijk.
004	<b>Hulzen • Optimale verzorging</b>
	Twee hulzen aan het hoofdeinde voor serumhouder, bedgalg of accessoires zorgen ervoor dat het bed optimaal kan uitgerust worden.
005	<b>Onrusthekkens (*) • Effectieve bescherming</b>
	Een volledige bescherming dankzij de doorlopende Pollux of Trix onrusthekkens. De telescopisch verlengbare Trix onrusthekkens vormen ook bij bedverlenging de ultieme bescherming over de ganse bedlengte.
006	<b>Hoog/laag zuilenkolom • Verborgene technologie</b>
	De onopvallende maar strak vormgegeven zuilenkolom herbergt een waar staaltje van technologie. De grote verstelmogelijkheid vergemakkelijkt niet alleen de verzorging maar bovendien verhoogt de open onderwagen de tillift-toegankelijkheid en het reinigingsgemak.
007	<b>Accessoirehouders (*) • Hoge functionaliteit</b>
	Aan beide zijden zorgen 3 multifunctionele houders voor het snel en gemakkelijk aanbrengen van accessoires.
008	<b>Rempedaal • Gemakkelijk bereikbaar</b>
	2 per 2 geremde tweelingwielen vergemakkelijken het gebruik van het Velino bed voor het verzorgend personeel.
009	<b>Afdekkap • Verborgene functionaliteit</b>
	De tweelingwielen zijn verborgen dankzij een passend vormgegeven afdekkap. Het bed is verplaatsbaar in alle hoogten en posities.
010	<b>Vergrendeldoos (*) of mini-verpleegbox (*) of HD met magneetsleutel (*)</b>
	Deze laten toe om de verschillende elektrische bedfuncties algemeen of selectief uit te schakelen. Met de mini-verpleegbox en de handbediening kunnen ook de bedfuncties geactiveerd worden.
011	<b>Houten ombouw (*) • Extra uitstraling</b>
	Een houten afwerkingslat over de volledige lengte van het ligkader draagt bij tot de huiselijke uitstraling van het bed.

Haelvoet nv  
Uitgave 2014  
Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.  
Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.


\* optie bij Velino

## Comfort voor ieder

De bewoner en verzorgend personeel eisen vandaag een comfortabel en ergonomisch bed, zodat de resident zich zo autonoom mogelijk kan voelen en de verpleging de nodige zorg efficiënt kan toedienen.


### • Handbediening

De handschakelaar is gebruiksvriendelijk, eenvoudig bedienbaar en heeft duidelijke en herkenbare druktoetsen:

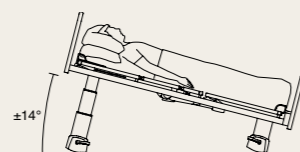


#### (anti-) Trendelenburgpositie

De anti-Trendelenburgpositie kan uitgevoerd worden via de handschakelaar en de mini-verpleegbox (\*), terwijl de Trendelenburgpositie enkel kan uitgevoerd worden via de mini-verpleegbox (\*) of d.m.v. een handbediening met magneetsleutel (\*).

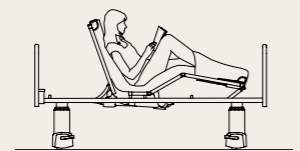



#### Zit- of relaxpositie

Bij deze functie worden de rugsteun en kniesteun simultaan geïnclineerd. De zitpositie is optimaal bij darmklachten of ademhalingsproblemen maar betekent evenzeer een meerwaarde voor de resident tijdens het eten, drinken of lezen.

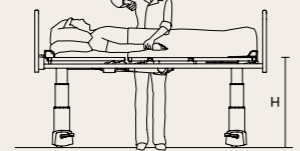

#### Hoge positie

De hoogste positie van het bed bedraagt 80,5 cm. De dagelijkse verzorging en behandeling kunnen uitgevoerd worden zonder belasting van de rug voor het verplegend personeel.

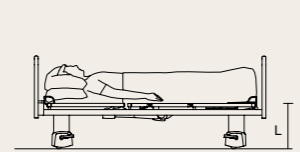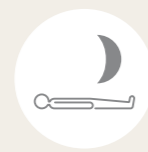

#### Lage- of slaappositie

De ideale slaappositie in één drukknop geprogrammeerd, waarbij het bed in de laagste stand gebracht wordt, terwijl rug- en kniesteun horizontaal komen.

Voor het optimaal gebruik 's nachts kan men opteren voor een verlichte handschakelaar (\*), waarbij de functietoetsen oplichten bij aanraking.



001



002



003



004



005

### • Selectieve blokkering

De handbediening met selectieve blokkering (\*) bezit alle functies van de standaard handbediening. Daarnaast is het ook mogelijk de CPR- en Trendelenburgpositie en het nachtlucht te activeren. Alle bedfuncties kunnen individueel geblokkeerd worden d.m.v. een magneetsleutel.



De voordelen zijn talrijk:

- Bedienen en blokkeren van de bedfuncties gebeurt vanuit 1 centrale handbediening.
- Efficiënte activatie via de handbediening, zonder belasting van de rug.

### • Vergrendeldoos en mini-verpleegbox

Naast de standaard handbediening of handbediening met selectieve blokkering kan men opteren voor een vergrendeldoos (\*) die d.m.v. een draaiknop alle elektrische functies van de handschakelaar blokkeert. De mini-verpleegbox (\*) biedt het verplegend personeel de mogelijkheid om, naast dezelfde functies van de handbediening, de volgende posities of functies in te stellen:

- de Trendelenburgpositie, die niet door de bewoner mag worden ingesteld;
- de CPR-functie die het bed in een horizontale lage positie brengt;
- het selectief blokkeren van de handschakelaar d.m.v. de "sleuteltoets".

### • Nachtlucht

Een discreet nachtlucht (\*) onderaan het bed zorgt ervoor dat de bewoner in een verduisterde ruimte zelfstandig zijn weg van en naar het bed vindt, zonder hulp van het verplegend personeel.

### • Batterij

De Velino kan worden uitgerust met een oplaadbare batterij (\*) die het mogelijk maakt om tijdelijk alle functies van het bed te activeren wanneer het bed niet met het stroomnet verbonden is.

001 De verlichte handschakelaar (\*) verhoogt 's nachts de zelfredzaamheid van de resident.

002 Een nachtlucht (\*) helpt de bewoner bij de oriëntatie tijdens de nacht. Dit wordt geactiveerd via de mini-verpleegbox (\*) of de handschakelaar met selectieve blokkering (\*).

003 De vergrendeldoos (\*) vermijdt het ongewenst verstellen van het ligvlak.

004 De mini-verpleegbox (\*) biedt een optimale functionaliteit.

005 De handschakelaar met selectieve blokkering (\*) en magneetsleutel.

### • Snelverstelling

De snelverstelling of CPR-hendel (\*) brengt de rugsteun manueel in horizontale positie. Deze hendel is gemakkelijk bereikbaar aan beide zijden van het bed.

\* optie bij Velino




## Gebruiksvriendelijk voor ieder

Bij het ontwerp van het Velino verpleegbed werd ruime aandacht besteed aan efficiëntie in de verzorging. Dankzij de volledig open onderwagen kunnen alle in de handel gebruikelijke patiëntenliften onder het Velino bed worden gereden. Bovendien kan er onder het bed gereinigd worden zonder het bed te verplaatsen.


- **Rempedaal - Vlot bereikbaar**

2 per 2 geremde tweelingwielen vergemakkelijken het gebruik van het Velino bed voor het verzorgend personeel.

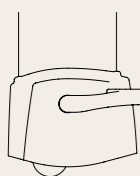

- **2 wielen vrijstaand**

Deze positie laat toe het bed in alle richtingen te bewegen.

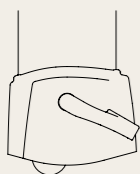

- **2 wielen geremd**

- **Ligvlak - Gemakkelijke reiniging**

De standaard afgeronde stalen ligvlakprofielen bieden de mogelijkheid om het ligvlak uiterst efficiënt te reinigen. Het Velino bed is optioneel verkrijgbaar met geperforeerde uitneembare kunststof panelen, voorzien van geïntegreerde matrashouders. Deze ligvlakdelen zijn door hun uitgekiende vormgeving en hun vlotte uitneembaarheid uiterst snel te reinigen.

- **Open onderwagen - Reinigingsgemak**

Een groot voordeel is de open onderwagen die dankzij de afwezigheid van verbindingsbalken het reinigingsgemak vergroot.

- **Hoog-Laag kolom - Onderhoudsvrij**

Haelvoet gebruikt enkel onderhoudsvrije motoren en elektrische systemen. De motoren kunnen bovendien uiterst eenvoudig worden vervangen.

- **Bedverlenging - Flexibel**

Een verpleegbed moet aan ieders wensen kunnen voldoen, onafhankelijk van de grootte van de bewoner. De geïntegreerde bedverlenging laat toe om het bed met 20 cm te verlengen.

Twee verschillende methoden voor de bedverlenging zijn naar keuze beschikbaar: een telescopische bedverlenging in combinatie met de verlengbare Trix onrusthekkens of een permanente bedverlenging van 20 cm bij gebruik van lange Pollux onrusthekkens.


Samen met de optionele voetensteunverlenging (\*) wordt zo een volledige functionaliteit van het ligvlak gegarandeerd.



006

## Veiligheid troef

Onze verschillende onrusthekkens bieden de bewoner een optimale veiligheid in elke bedpositie. Elk type onrusthekken heeft zijn specifieke voordelen voor gebruiker en resident. We laten u graag de vrije keuze.

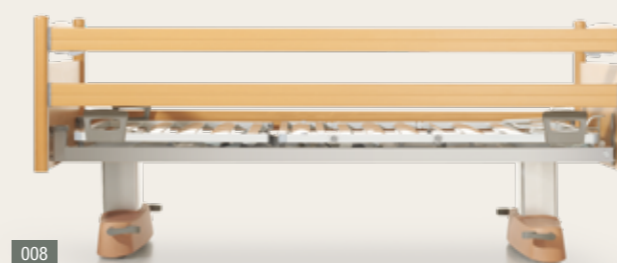

008



009



007

De **Pollux onrusthekkens (\*)** bestaan uit 2 stevige houten latten. Een gewaarborgde afstand tussen de twee latten zorgt ervoor dat de Pollux onrusthekkens probleemloos aan de strengste normen beantwoorden. De tweedelige handbediening beschikt over een veiligheidsfunctie die het onbedoeld neerhalen van het onrusthekken verhindert.

De **Trix onrusthekkens (\*)** bieden met hun 3 latten veiligheid over de volledige lengte van het bed. Een geïntegreerd telescopisch systeem zorgt ervoor dat het Trix onrusthekken, ook wanneer het bed wordt verlengd, de zijkant van het bed over de volle lengte afsluit.



010

006 Het **Trix onrusthekken (\*)** beschermt de resident over de volledige bedlengte, dankzij het unieke telescopische systeem.

007 Bij gebruik van dikkere anti-decubitus matrassen kan een optionele **4de lat (\*)** 13 cm extra bescherming bieden. Deze bescherming is volledig geïntegreerd in het Trix onrusthekken zodat geen extra losse opzetstukken nodig zijn.

008 Het Velino bed uitgerust met **Pollux onrusthekkens (\*)** en metalen ligvlakprofielen.

009 Het Velino bed uitgerust met **Trix onrusthekkens (\*)**, kunststof ligvlakpanelen (\*), houten afwerkingslat (\*) en accessoirehaken (\*).

010 De tweehandbediening beschikt over een veiligheidsfunctie die het onbedoeld neerhalen van het onrusthekken verhindert.

\* optie bij Velino

## Fraaie vormgeving

Iedereen is begaan met het welzijn van de bewoner. Zelfredzaamheid en vormgeving zijn de omgevingsfactoren die hierbij een belangrijke rol spelen. Net daarom werden voor het Velino bed de modernste techniek en een vooruitstrevende functionaliteit in een fraai design verpakt.

### • Bedpanelen

Onze bedopbouw maakt het mogelijk om te kiezen uit 4 types. Elk paneel wordt gekenmerkt door zijn duidelijke lijnvoering en oog voor detail. Dankzij de afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten oogt het paneel niet alleen stijlvol, maar is dit tevens gemakkelijk te onderhouden.



011

### • Afwerking

Het Velino bed is standaard verkrijgbaar in natuur kleur. Bij een afwijkende kleurvraag wordt de afdekkap in een grijze uniekleur uitgevoerd. Zo wordt de mogelijkheid geboden om dit bed volledig te integreren in het interieur van uw instelling.

011 Op elkaar afgestemde kleuren, huiselijke materialen en een functioneel design vormen een geheel dat het welzijn van de bewoner bevordert.

012 De verborgen wielen zorgen voor een huiselijke uitstraling van het bed.



012



**Type 1:** Het standaard bedpaneel **Midea** heeft een moderne uitstraling.



**Type 2:** De uitgepuurde vorm van het bedpaneel **Puro (\*)** met handvat is mooi en functioneel.






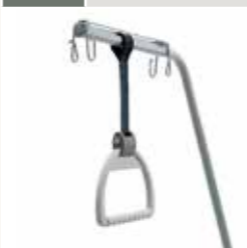

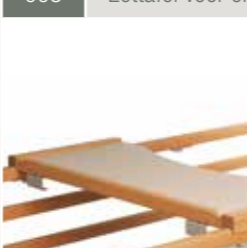




**Type 3:** Het fraai vormgegeven bedpaneel **Felina (\*)** wordt getypeerd door een licht gebogen handgreep.



**Type 4:** Een strakkere lijnvoering kenmerkt het bedpaneel **Valentino (\*)**.

## Accessoires


De bijhorende accessoires zijn optimaal afgestemd op de bestaande bedhulzen en accessoirehouders. Bij Haelvoet stellen wij aan de accessoires dezelfde strenge kwaliteitseisen als aan onze verpleegbedden.

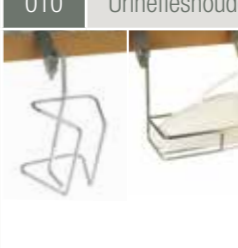006	Demonteerbare voetensteunverlenging		Om het ligvlak optimaal te gebruiken bij een bedverlenging, kan er gekozen worden om een los voetverlengstuk van 20 cm aan het voeteneind te plaatsen.
001	Bedgalg		De bedgalg bestaat uit een geplooidedijkwandige stalen buis. De bedgalg is voorzien van een handgreep met lint: manueel aanpasbaar of met automatisch oprolsysteem (*).
007	Serumhouder		De serumhouder bestaat uit een vast gedeelte en een verstelbaar gedeelte, voorzien van vier serumphaken. De serumhouder kan eveneens verkregen worden in een niet-verstelbare versie met 2 serumphaken.
002	Serumhouder voor bedgalg		De serumhouder voor de bedgalg heeft 4 haken en is eenvoudig op de bedgalg te plaatsen.
008	Flexibele handschakelaarhouder		De flexibele handschakelaarhouder zorgt ervoor dat de handschakelaar bereikbaar is voor zowel de bewoner als voor het verplegend personeel.
003	Eettafel voor onrusthekkens		De houten eettafel kan geplaatst worden op beide types onrusthekkens en kan eenvoudig worden opgehangen aan het voetpaneel.
009	Opstahulp		De opstahulp biedt de resident een optimale steun bij het uit- en instappen. De vormgeving maakt een ergonomische uit- en instapbeweging mogelijk.
004	Accessoirebeugel		De accessoirebeugel kan gebruikt worden wanneer klantspecifieke wensen zich opdringen. De beugel met 4 haken is 310 mm lang en wordt geplaatst in de optionele accessoirehaken.
010	Urinefleshouder		De urinefleshouder wordt gemonteerd in de 2 kunststof accessoirehaken die optioneel aanwezig zijn op het Velino bed. Er kan gekozen worden uit 2 modellen.
005	Bokaalhouder		De bokaalhouder is voorzien voor het plaatsen van twee bokaalen. De houder wordt geplaatst in de optionele accessoirehaken.
011	Hoes voor onrusthekkens		De afneembare hoes bestaat uit kunstleder en kan op een zeer eenvoudige manier rond het onrusthekkens gemonteerd worden. Deze biedt voornamelijk bescherming voor de onrustige bewoners.

\* optie bij Velino

# Velino bed Samenvatting

## Afmetingen en prestaties

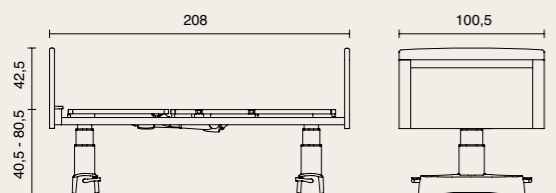

- breedte: 100,5 cm, lengte: 208 cm;
- hoogtevariatie ligvlak: ± 40,5 cm - ± 80,5 cm;
- veilig werkgewicht: 230 kg;
- gewicht (excl. uitbreidingen): 140 kg;
- ligvlakmaat: 204 x 86 cm;
- matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm.



Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid – in beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur én worden geleverd met 10 jaar garantie op constructiefouten.



Dankzij onze moderne milieuvriendelijke productieprocessen, een maximaal gebruik van recycleerbare materialen en ons PEFC-certificaat betekent kiezen voor Haelvoet, kiezen voor een eerlijk product.



Het Velino bed wordt vervaardigd volgens ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en is in overeenstemming met de Europese Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

**EN 60601-1** Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties.

**EN 60601-1-2** Medische elektrische toestellen - Deel 1-2: Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestaties - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en beproevingen.

**EN 60601-2-52** Medische elektrische toestellen - Deel 2-52: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden.

**EN ISO 14971** Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.

	Standaard Velino		Opties Velino				
LIGVLAK							
	• 3-delig stalen ligvlak	• Telescopische bedverlenging tot 20 cm	• 4-delig stalen ligvlak	• 3-delig ligvlak met uitneembare kunststofplaten	• 4-delig ligvlak met uitneembare kunststofplaten	• Voetensteunverlenging tot 20 cm	
WIELEN							
	• Verborgen tweelingwielen ø 50 mm, 2 per 2 geremd						
PANEELTYPE							
	• Midea paneel		• Puro paneel	• Felina paneel	• Valentino paneel	• Stootwielen (niet op Midea paneel)	• Muurafstandhouder
ONRUSTHEKKENS							
			• Pollux onrusthekken	• Trix onrusthekken	• Trix onrusthekken met 4de lat		
BEDIEUING							
	• Handbediening		• Vergrendeldoos (ACL)	• Mini-verpleegbox (ACC)	• Verlichte handchakelaar (4-delig ligvlak)	• Handchakelaar met selectieve blokkering (4-delig ligvlak)	• Nachttlicht onder bed
EXTRA'S							
		• Houten ombouw aan ligkader	• Manuele snelverstelling (CPR)	• Dekenrek	• Batterij	• 6 kunststof accessoirehaakjes	