

# Velino Care

**08557** Patul de îngrijire Velino este un pat multifuncțional, ajustabil pe înălțime prin coloane, care maximizează atât confortul pacientului, cât și ușurința de utilizare.

## Cadrul inferior

- Ajustarea înălțimii prin intermediul a 2 coloane de ridicare telescopice.
- Ajustare Trendelenburg invers posibilă până la  $\pm 14^\circ$ .
- Roțile sunt ascunse printr-un capac sintetic cu aspect de lemn sau de culoare gri.
- Roți duble  $\varnothing 50$  mm, frânate 2 câte 2.
- Pedala de frână poate fi activată de pe ambele părți ale patului.
- Cadrul deschis este accesibil și ușor de curățat.

## Platforma saltea

- Platformă pentru saltea cu 3 sau 4 (\*) secțiuni.
- Spătarul este ajustabil electric până la  $\pm 70^\circ$  cu autoregresie.
- Secțiunea genunchi este ajustabilă electric până la  $\pm 34^\circ$  (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea picioare este ajustabilă manual pentru poziția Fowler (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea gambe este ajustabilă manual până la  $\pm 14^\circ$  (la versiunea cu 3 secțiuni).
- Manipulările electrice ale secțiunilor platformei saltea sunt echipate cu o clemă de siguranță.
- Platformă saltea cu profile rotunjite de oțel.
- Prevăzută cu orificii pentru curele de imobilizare.
- Spătarul și secțiunea picioare sunt echipate cu suporturi integrate pentru saltea.
- Extensie telescopică a patului de până la +20 cm (nu este posibil cu protecții laterale Pollux).
- Cele 2 colțuri de la cap sunt echipate cu suporturi de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de ridicare.
- Șuruburile de fixare nu sunt vizibile la panouri.
- Panourile de pat sunt realizate din fag uscat (\*).
- Colțuri rotunjite pentru a crește siguranța pasivă.

## Funcții electrice

- Funcțiile electrice sunt activate prin intermediul unor motoare Linak care nu necesită întreținere.
- Motoarele platformei saltea sunt prevăzute cu o clemă de siguranță și pot fi înlocuite fără a fi nevoie de unelte.
- Funcțiile electrice pot fi activate prin intermediul telecomenzii sau a *mini-panoului de comandă* (\*).
- Telecomanda este echipată cu o funcție de dormit preprogramată și o funcție de relaxare.
- *Mini-panoul de comandă* (\*) permite blocarea selectivă a mai multor funcții electrice, în timp ce panoul de blocare (\*) blochează toate funcțiile electrice printr-un singur buton.

### Tipuri de panouri

- Midea (standard)
- Valentino (\*)
- Puro (\*)
- Felina (\*)

### Protecții laterale

- Pollux (\*)
- Trix (\*)


### Accesorii

Referință la lista de accesorii.



## Dimensiuni și date tehnice

- Lățime: 100,5 cm. Lungime: 208 cm
- Variația înălțimii platformei saltea:  $\pm 40,5$  cm -  $\pm 80,5$  cm
- Sarcina de lucru sigură: 250 kg
- Greutate (fără opțiuni): 140 kg
- Dimensiuni platformă saltea: 204 x 86 cm
- Dimensiuni saltea: 195 x 85 cm, grosime: 12 - 15 cm
- Consum în stand-by: 0,5 W (max. 4,38 kWh/an)

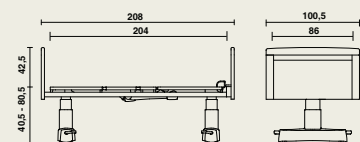

## Materiale și finisaje

- Lemn: fag (masiv, furnir), PAL (melaminat).
- Metal: vopsea epoxidică RAL 9006 *aluminiiu alb*.
- Puncte de articulație cu rulmenți sintetici (= nu necesită întreținere).
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Referință la gama noastră extinsă de **culori**.

## Opționale

- Platformă saltea cu 4 secțiuni.
- Platformă saltea cu 3 sau 4 secțiuni detașabile din laminat solid.
- Extensie platformă saltea până la +20 cm.
- Tipuri de panouri: Puro, Felina sau Valentino.
- Bumpere de protecție (nu este posibil cu Midea).
- Distanțier de perete.
- Protecții laterale.
- Panou de blocare (ACL).
- Mini-panou de comandă asistentă (ACC).
- Telecomandă cu sistem de blocare selectivă.
- Lumină de noapte sub pat.
- Cârlige pentru accesorii.
- Înelși de lemn la cadrul platformei saltea.
- Baterie.
- Eliberare rapidă manuală a spătarului (CPR).
- Sertar extensibil.

(\*) Opțional

