



WELL Communications




Vico Care

by Haelvoet



HAEVOET NV
L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM
T +32 (0) 51 48 66 95
INFO@HAEVOET.BE WWW.HAEVOET.BE

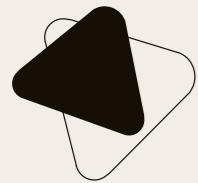

HOSPITAL - NURSING HOME FURNITURE EQUIPEMENT HOSPITALIER - MAISON DE REPOS ZIEKENHUIS- EN RUSTHUISUITRUSTING

Vico

techniek die presteert



001	Ligvlak • Comfortabel liggen
	Standaard uitgerust met goed ventilerende metalen ligvlakprofielen. De optionele volkunststof ligvlakdelen (*) zijn uitneembaar en gemakkelijk in onderhoud.
002	Matrashouders • Doelgericht aanwezig
	De matrashouders belemmeren een zijdelingse verschuiving van de matras. Deze doen eveneens dienst als handvat om de rug en kniesteun manueel te verstellen.
003	Onrusthekkens (*) • Veiligheid kent geen prijs
	De atmosfeer onrusthekkens beschermen de patiënt over 2/3 van de lengte van het bed, terwijl de doorlopende Pollux en Trix onrusthekkens een volledige bescherming bieden.
004	Hulzen • Optimale verzorging
	Twee hulzen aan het hoofdeinde voor serumhouder, bedgalg of accessoires zorgen ervoor dat het bed optimaal en volgens de behoeften uitgerust kan worden.
005	Houten ombouw ligkader (*) • Extra uitstraling
	De houten afwerkingslat aan het ligkader draagt bij tot de huiselijke uitstraling van het bed.
006	Bedieningshendel • Centraal en binnen handbereik
	De bedieningshendel activeert een gasveer teneinde het gewenste ligvlakdeel te kunnen verstellen.
007	Afdekkap (*) • Hygiënisch
	De verwijderbare afgeronde kunststof afdekkap vereenvoudigt het reinigen van de onderwagen.
008	Hoog/laag systeem • Uiterst stabiel
	De hoog/laag draagarmen garanderen een uiterst stabiel bed op alle ligvlakhoogtes. De grote verstelmogelijkheid van 41 cm tot 80 cm (bij wielen ø 125 mm) vereenvoudigt het uit bed stappen en vergemakkelijkt de verzorging.
009	Hoog/laag voetpedaal • Eenvoudig te bedienen
	De hoog/laag verstelling gebeurt aan de hand van een hydraulische pomp instelbaar door middel van een voetpedaal.
010	Centrale rem (*) • Activatie in één beweging
	Centraal geremde wielen, met een goed bereikbare pedaal, vergemakkelijken het gebruik van het Vico bed voor het verzorgend personeel.
011	Wielen • Grote wendbaarheid
	Een ruime waaier aan hoogwaardige designwielen garandeert een uiterst mobiel en wendbaar bed.
012	Bedpanelen • Een harmonieus geheel
	Voor het hoofd- en voetpaneel zijn 4 verschillende designvarianten in fraaie houtdecors mogelijk.


* optie bij Vico Care

Comfort voor ieder

Het comfort van een eenvoudige bediening en een efficiënt gebruik van het bed ondersteunt het verplegend personeel bij hun dagelijkse werk.


• Bedieningen

De bedieningshendel is gebruiksvriendelijk en eenvoudig bedienbaar. Het hoog/laag voetpedaal is gemakkelijk bereikbaar aan beide zijden van het bed.

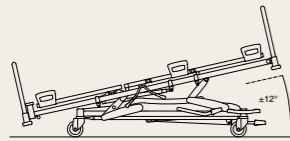


(anti-) Trendelenburgpositie

De (anti-) Trendelenburgpositie (*) kan uitgevoerd worden via het rode voetpedaal aan het voeteneinde van het bed. Wanneer het pedaal is ingedrukt, inclineert het bed in een zacht vloeiende beweging tot de gewenste positie.

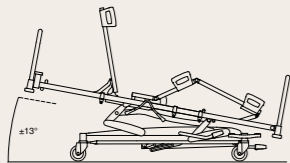

Zit- of relaxpositie

Het drie- of vierdelige (*) ligvlak biedt veelvoudige verstelmogelijkheden en beschikt over een eenvoudig te bereiken bediening aan beide zijden van het bed. Op deze manier kan gemakkelijk de gewenste zitpositie - of bij een vierdelig ligvlak een relaxpositie (*) - verkregen worden.

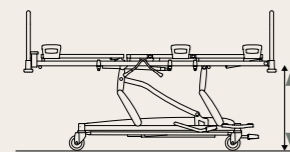

Hoog/laag positie

Met de hoog/laag pompbediening kan men handenvrij de gewenste bedhoogte aan beide zijden van het bed instellen. De hoogste positie van het bed bedraagt 80 cm (wielen \varnothing 125 mm). De dagelijkse verzorging en behandeling kunnen hierdoor uitgevoerd worden zonder belasting van de rug.



• Virtueel draaipunt

Een virtueel draaipunt verhoogt aanzienlijk het ligcomfort voor de resident. Bij het omhoog inclineren van de rugsteun verschuift de rugsteun automatisch mee naar achteren. Hierdoor ontstaat er een drukontlasting van de bekkenzone en wordt het decubitusrisico gereduceerd.




Mobiel en flexibel


Het dagelijks gebruik wordt vereenvoudigd dankzij een gemakkelijk verplaatsbaar en wendbaar bed.

• Centrale rem

Aan beide zijden van het voeteneinde is het Vico bed voorzien van een design rempedaal (*). De pedaal bedient simultaan de 4 wielen en kan in 3 standen geplaatst worden.

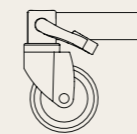


4 wielen geremd

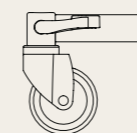

4 wielen vrijstaand

Deze positie laat toe het bed in alle richtingen te bewegen.

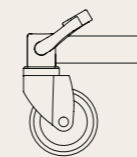

1 gefixeerd richtingswiel

Dit vergemakkelijkt het besturen van het bed bij een rechtlijnig traject.



• Stroomloos

Het Vico Care bed is volledig mechanisch en zorgt ervoor dat dit bed overal vlot inzetbaar is.


Gebruiksvriendelijk

• Mechanisch - Minimaal in onderhoud

Een onderhoudsvrije hydraulische pomp en onderhoudsvrije gasveren maken dit bed tot een duurzame investering.

• Verwijderbare afdekkap - Hygiënisch

Dankzij de afgeronde kunststof afdekkap (*) zijn de moeilijk bereikbare oppervlakken gemakkelijk te reinigen en krijgt vuilophoping geen kans.

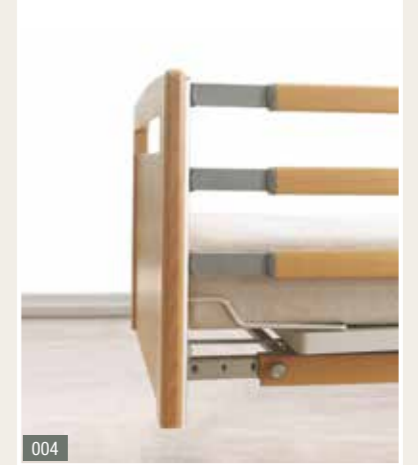

• Bedverlenging

Een verpleegbed moet aan ieders wensen kunnen voldoen, onafhankelijk van de grootte van de bewoner. De geïntegreerde bedverlenging laat toe om het bed met 20 cm te verlengen.

Twee verschillende methoden voor de bedverlenging zijn naar keuze beschikbaar: een telescopische bedverlenging in combinatie met de verlengbare Trix onrusthekkens of een permanente bedverlenging (van 10 of 20 cm) bij gebruik van lange Pollux onrusthekkens.

Samen met de optionele voetverlenging (*) wordt zo een volledige functionaliteit van het ligvlak gegarandeerd.

001 De bedieningshendel

002 Het hoog/laag voetpedaal bevindt zich aan beide zijden van het bed, en is vlot bereikbaar voor het verplegend personeel.

003 Het Trend- en anti-Trendelenburgpedaal ()*

004 Het telescopische Trix onrusthekkens () zorgt wanneer het bed verlengt is, voor een complete bescherming over de volledige lengte van het bed.*

005 Indien men opteert voor een centrale rembediening, wordt standaard het enkelvoudige rempedaal aangeboden. Het dubbele rempedaal met richtingswiel is hierbij optioneel.

006 De verwijderbare afdekkap () zorgt voor een gemakkelijke reiniging.*



Veiligheid troef

Onze verschillende onrusthekkens bieden de bewoner een optimale veiligheid in elke bedpositie. Elk type onrusthekkens heeft zijn specifieke voordelen voor gebruiker en resident. We laten u graag de vrije keuze.



006 Bij gebruik van dikkere anti-decubitus matrassen kan een optionele **4de lat (*)** 13 cm extra bescherming bieden. Deze bescherming is volledig geïntegreerd in het Trix onrusthekkens zodat geen extra losse opzetstukken nodig zijn.

007 De tweehandbediening beschikt over een veiligheidsfunctie die het onbedoeld neerhalen van het onrusthekkens verhindert.

* optie bij Vico Care



De **Atmosphère onrusthekkens (*)** bestaan uit één geheel en zijn neerklapbaar door een eenvoudig vergrendelsysteem.











De **Pollux onrusthekkens (*)** bestaan uit 2 stevige houten latten. Een gewaarborgde afstand tussen de twee latten zorgt ervoor dat de Pollux onrusthekkens probleemloos aan de strengste normen beantwoorden. De tweedelige handbediening beschikt over een veiligheidsfunctie die het onbedoeld neerhalen van het onrusthekkens verhindert.

De **Trix onrusthekkens (*)** bieden met hun 3 latten veiligheid over de volledige lengte van het bed. Een geïntegreerd telescopisch systeem zorgt ervoor dat het Trix onrusthekkens, ook wanneer het bed wordt verlengd, de zijkant van het bed over de volle lengte afsluit.



Accessoires

De bijhorende accessoires zijn optimaal afgestemd op de bestaande bedhulzen en accessoirehouders. Bij Haelvoet stellen wij aan de accessoires dezelfde strenge kwaliteitseisen als aan onze verpleegbedden, zodat u altijd de zekerheid hebt daadwerkelijk met een kwalitatief hoogstaand product te werken.

001	Bedgalg		De bedgalg bestaat uit een geplooid dikwandige stalen buis. De bedgalg is voorzien van een handgreep met lint: manueel aanpasbaar of met automatisch oprolsysteem.	006	Serumhouder		De serumhouder bestaat uit een vast gedeelte en een verstelbaar gedeelte, voorzien van vier serumhaken. De serumhouder kan eveneens verkregen worden in een niet-verstelbare versie met 2 serumhaken.
002	Serumhouder voor bedgalg		De serumhouder voor de bedgalg heeft 4 haken en is eenvoudig op de bedgalg te plaatsen.	007	Flexibele handschakelaarhouder		De flexibele handschakelaarhouder zorgt ervoor dat de handschakelaar bereikbaar is voor zowel de bewoner als voor het verplegend personeel.
003	Eettafel voor onrusthekkens		De houten eettafel kan geplaatst worden op beide types onrusthekkens en kan eenvoudig worden opgehangen aan het voetpaneel.	008	Opstahulp		De opstahulp biedt de resident een optimale steun bij het uit- en instappen. De vormgeving maakt een ergonomische uit- en instapbeweging mogelijk.
004	Accessoirebeugel		De accessoirebeugel kan gebruikt worden wanneer klantspecifieke wensen zich opdringen. De beugel met 4 haken is 310 mm lang en wordt geplaatst in de optionele accessoirehaken.	009	Urinefleshouder		De urinefleshouder wordt gemonteerd in de 2 kunststof accessoirehaken die optioneel aanwezig zijn op het Vico bed. Er kan gekozen worden uit 2 modellen.
005	Bokaalhouder		De bokaalhouder is voorzien voor het plaatsen van twee bokaalen. De houder wordt geplaatst in de optionele accessoirehaken.	010	Hoes voor onrusthekkens		De afneembare hoes bestaat uit kunstleder en kan op een zeer eenvoudige manier rond het onrusthekkens gemonteerd worden. Deze biedt voornamelijk bescherming voor de onrustige bewoners.

Fraaie vormgeving

Iedereen is bekommerd om het welzijn van de bewoner. Zelfredzaamheid en vormgeving zijn dé omgevingsfactoren die hierbij een belangrijke rol spelen. Net daarom werd voor het Vico Care bed de modernste techniek en een vooruitstrevende functionaliteit in een fraai design verpakt.

• Bedpanelen

Onze bedopbouw maakt het mogelijk om te kiezen uit 4 types. Elk paneel wordt gekenmerkt door zijn specifieke lijnvoering en oog voor detail. Dankzij de afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten oogt het paneel niet alleen stijlvol, maar is dit tevens gemakkelijk te onderhouden.



008

008 Op elkaar afgestemde kleuren, huiselijke materialen en een functioneel design vormen een geheel dat het welzijn van de bewoner bevordert.

* optie bij Vico Care



Type 1: Het standaard bedpaneel **Midea** heeft een moderne uitstraling (enkel in combinatie met Pollux onrusthekkens).



Type 2: Het tijdloze bedpaneel **Hypnos (*)** is door zijn ronde massieve stijlen in vele interieurs inzetbaar.



Type 3: Het fraai vormgegeven bedpaneel **Felina (*)** wordt getypeerd door een licht gebogen handgreep.



Type 4: Een strakkere lijnvoering kenmerkt het bedpaneel **Valentino (*)**.

• Afwerking en kwaliteit

Dankzij de ruime kleurkeuze uit onze standaardcollectie wordt uw bed volledig geïntegreerd in het interieur van uw instelling.

Melamine



classic beech
code 0381BS



birch
code 1715BS




blonde liberty elm
code K017PW



sand barbara oak
code KS43SN




light select walnut
code K008PW

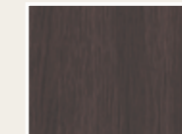


louisiana wengé
code 9763BS



wengé
code 0854BS

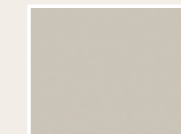


cashmere
code 5981BS



snow white
code 865BS


Massief hout

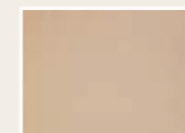

classic beech
code 0381



white birch *
code 1715

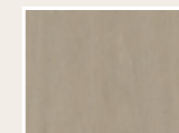


blonde elm *
code K017




sand oak *
code K543



light walnut *
code K008

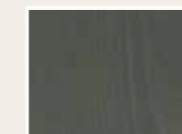


louisiana *
code 9763

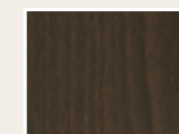

wengé *
code 0854



cashmere *
code 149



white mat *
code 300

U kunt steeds stalen van onze beitskleuren bij Haelvoet opvragen.

Indien gewenst zijn oplossingen mogelijk passend bij de totale inrichting van uw zorgomgeving.



Dit PEFC-certificaat is een waarborg dat het door Haelvoet gebruikte hout afkomstig is van een duurzaam beheerd bos. Een duurzaam bosbeheer is een beheer dat tegelijk economisch leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal gunstig is. Door onze PEFC-producten te kopen, draagt u ook bij tot het voortbestaan van onze bossen en een beter leefmilieu.

Hout is een natuurproduct, geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.




Haelvoet nv
Uitgave 2026

Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.
Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Vico Care Samenvatting

Afmetingen en prestaties (bij standaard bed)

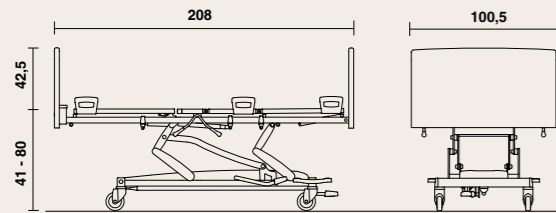

- breedte: 100,5 cm, lengte: 208 cm;
- hoogtevariatie ligvlak:
 - ± 41 cm - ± 80 cm (bij wielen Ø 125 mm),
 - ± 40 cm - ± 79 cm (bij verborgen wielen);
- vrije ruimte onderwagen: 100 à 150 mm (i.f.v. hoogte-instelling ligvlak);
- veilig werkgewicht: 180 kg;
- gewicht (excl. uitbreidingen): 115 kg
- matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm



Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid – in beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 10 jaar garantie op constructiefouten.



Dankzij onze moderne milieuvriendelijke productieprocessen, een maximaal gebruik van recycleerbare materialen en ons PEFC-certificaat betekent kiezen voor Haelvoet, kiezen voor een eerlijk product.



Het Vico verpleegbed wordt vervaardigd volgens ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en is in overeenstemming met de Europese Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

EN 60601-1 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor veiligheid, met uitzondering van de elektrische bepalingen.

EN 60601-2-52 Medische elektrische toestellen - Deel 2-52: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden, met uitzondering van de elektrische bepalingen.

EN ISO 14971 Toepassing van risicomangement op medische hulpmiddelen.

	Standaard Vico		Opties Vico			
LIGVLAK						
	• 3-delig stalen ligvlak	• Telescopische bedverlenging tot 20 cm	• 4-delig stalen ligvlak	• 3-delig ligvlak met uitneembare volkunststof platen	• 4-delig ligvlak met uitneembare volkunststofplaten	• Voetverlenging tot 20 cm
WIELEN						
	• Levina wielen Ø 125 mm, individueel geremd		• Cover design wielen Ø 125 mm, centraal geremd	• Cover design wielen Ø 150 mm, centraal geremd	• Integral wielen Ø 150 mm, centraal geremd	• Verborgen wielen Ø 50 mm, centraal geremd
PANEELTYPE						
	• Midea paneel (enkel met Atmosphère- en Pollux onrusthekkens)		• Hypnos paneel	• Felina paneel	• Valentino paneel	• Stootwielen (niet op het Midea-paneel) • Muurafstandhouder
ONRUSTHEKKENS						
			• Atmosphère onrusthekkens	• Pollux onrusthekkens	• Trix onrusthekkens	• Trix onrusthekkens met 4de lat
BEDIENING						
	• Bedieningshendel	• Hoog/laag voetpedaal	• (anti-) Trendelenburgpedaal			
EXTRA'S						
			• Houten ombouw aan ligkader	• Decoratiestrip (voor- en achterprofiel van onderwagen)	• 6 kunststof accessoirehaakjes	